

# DE JUISTE MATE VAN BESCHERMING VOOR ELKE SITUATIE

In de gezondheidszorg is het tegenwoordig belangrijker dan ooit dat artsen zijn voorzien van de juiste beschermende kleding om verspreiding van ziekenhuisinfecties te kunnen verminderen.

Onze isolatiejassen bieden bescherming conform de AAMI-richtlijnen en dragen bij aan een verminderd risico op besmetting en overdracht van infectieuze organismen die tot ziekenhuisinfecties leiden.





# OVERZICHT BESCHERMENDE JASSEN

## HALYARD\* ISOLATIE

### TRI-LAYER AAMI1-JASSEN

### TRI-LAYER AAMI2-JASSEN

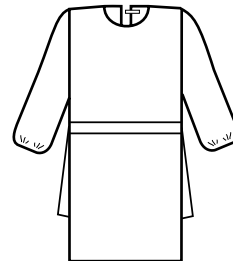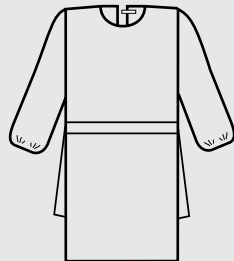

#### PRODUCTKENMERKEN

	Geel	Blauw	Blauw	Geel	Geel	Blauw	Blauw
Kleur	Geel	Blauw	Blauw	Geel	Geel	Blauw	Blauw
Productcodes	54100	54110	54111	69979	69988	69981	69987
Maat	L	L	XL	L	XL	Univ	XL
Materiaal	Lichtgewicht 3-laags SMS-materiaal			Middelzwaar 3-laags SMS-materiaal			
Gewicht	20g/m <sup>2</sup>			29g/m <sup>2</sup>			
ANSI/AAMI PB70-classificatie	1			2			
Spatbestendigheid	Gemiddeld			Goed			
Hydrostatische druk				≥20 cm H <sub>2</sub> O			
Bacteriële barrière SA	79%			85%			
Bacteriële barrière droge sporen	96%			99,40%			
Houdbaarheid	3 jaar			3 jaar			

#### AANBEVOLEN TOEPASSINGSMOGELIJKHEDEN

Bezoekersjas							
Standaard zorg/vervoer van patiënten		✓					
Wasserij/schoonmaak		✓					
Patiëntenzorg voor C- of D-isolatie						✓	
Medische/verpleegkundige handelingen met laag risico op het spatten van lichaamsvloeistoffen (intensive care, dialyseafdeling, afdeling Interne geneeskunde, kraamafdeling, (pathologisch) laboratorium, hogedrukkamer, ...)						✓	
Medische/verpleegkundige handelingen met reëel risico op het spatten van lichaamsvloeistoffen (SEH, trauma-afdeling, brandwondenafdeling, intensive care, ...)							
Chirurgische ingrepen of laboratoriumprocedures die een niet-steriele operatiejas vereisen							
Procedures met een grote hoeveelheid vloeistof (reïngen van instrumenten CSA)							
Bereiding van cytostatica							

#### GEBRUIKSKENMERKEN

Halssluiting		Tape				Tape	
Zijsluiting		Strikbandje				Strikbandje	
Open rugpand		Geen				Geen	
Manchetten		Elastisch				Elastisch	

#### VERPAKKING


100 per doos

100 per doos

# SEN

TIEJASSEN						HALYARD* JASSEN MET FOLIELAAG					
TRI-LAYER AAMI3-JASSEN		PROCEDURE-JASSEN		SPUNBOND-JASSEN		ONDOORLAATBARE COMFORTJASSEN				ONDOORLAATBARE JASSEN	
Blauw	Blauw	Blauw		Geel	Geel	Blauw				Blauw	
54310	54311	69025	69028	69124	69125	69600	69602	69601	69603	69316	69490
L	XL	Univ	XL	Univ	XL	Univ	Univ	XXL	XXL	XL	Univ
Zwaar 3-laags SMS-materiaal		Beschermend 3-laags SMS-materiaal		1-laags Spunbond-materiaal		Polymeerfolie + Spunbond				Polyethyleenfolie	
36g/m <sup>2</sup>		50g/m <sup>2</sup>		20g/m <sup>2</sup>		39g/m <sup>2</sup>				25µm	
3											
Zeer goed		Uitstekend		Zwak		Ondoorlaatbaar				Ondoorlaatbaar	
≥ 50 cm H <sub>2</sub> O		84,7 cm H <sub>2</sub> O				122,4 cm H <sub>2</sub> O					
92%											
99,80%											
3 jaar		N.v.t.		N.v.t.		N.v.t.				N.v.t.	
				✓							
✓											
✓											
		✓									
								✓			✓
								✓			
Tape		Klittenband		Strikbandje		Voorgesneden opening				Voorgesneden opening	
Strikbandje		Strikbandje		Strikbandje		Geen				Strikbandje	
Geen		Geen		Geen		Geperforeerd open rugpand				Geperforeerd open rugpand	
Elastisch		Gebreide manchetten		Elastisch		Duimlusjes/gebreide manchetten				Duimlusjes	
100 per doos		60 per doos		100 per doos		100 per doos				60 - 75 per doos	

# De HALYARD\* Tri-Layer-isolatiejassen zijn voorzien van beschermend 3-laags SMS-materiaal

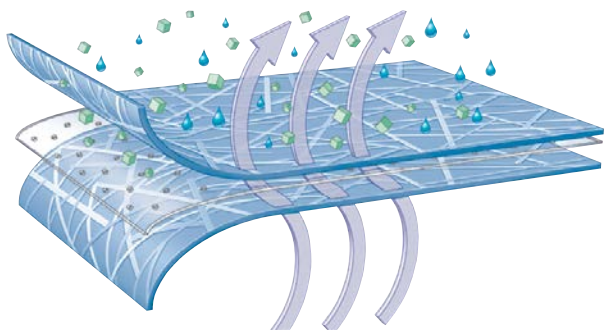

Buitenste lagen - Spunbond polypropyleen, doekachtig materiaal dat uitzonderlijk sterk en slijtvast is.

Middelste laag - fijnmazige meltblown polypropyleenmicrovezels die een groot aantal waterhoudende vloeistoffen wegfilteren.

## AAMI-richtlijnen: een betrouwbaar criterium voor bescherming

	NIVEAU 1	NIVEAU 2	NIVEAU 3
AAMI-niveau/prestatievereisten bij 4% AQL	Spray-impact < 14,5 g	Spray-impact < 1,0 g	Spray-impact < 1,0 g
		Hydrostatische druk > 20 cm	Hydrostatische druk > 50 cm
Verwacht risico op vloeistofcontact	Laag	Laag tot gemiddeld	Gemiddeld
Eigenschappen jas (gewicht)	Lichtgewicht SMS-materiaal	Middelzwaar SMS-materiaal	Zwaar SMS-materiaal

De AAMI-richtlijnen voor beschermende kleding bevatten minimale prestatienormen op het gebied van sterkte, barrière-eigenschappen en vochtbestendigheid. AAMI-gekeurde jassen worden getest onder gecontroleerde omstandigheden en dienen te voldoen aan een kwaliteitsniveau (AQL) van 4%; dit biedt een hoge mate van zekerheid dat gebruikers beschermd zijn tegen het verwachte risico op vloeistofcontact. Elk kledingstuk moet volledige bescherming bieden aan de voorzijde, de achterzijde en langs de naden. Daarnaast dient het te zijn voorzien van een label waarop het beschermingsniveau, variërend van AAMI-niveau 1 (laagste niveau) tot AAMI-niveau 4 (hoogste niveau), duidelijk is vermeld.



KNOWLEDGE NETWORK\* Klinische educatie  
Deskundige klantenservice  
Professionele buitendienst  
Tools en best practices  
Klinisch onderzoek  
Streven naar perfectie

Neem voor meer informatie contact op met het Customer Care Team van Halyard:

Tel: 0800 023 10 79 (gratis uit NL)

Fax: 0800 023 10 78 (gratis uit NL)

Tel: 0800 78 775 (gratis uit BELUX)

Fax: 0800 78 774 (gratis uit BELUX)

[customerservice.bnl@hyh.com](mailto:customerservice.bnl@hyh.com)

